


راهنمای سریع راه اندازی و استفاده از یونیت دوربین کمپانی Amnotec مدل

AMNOCAM 3000HD

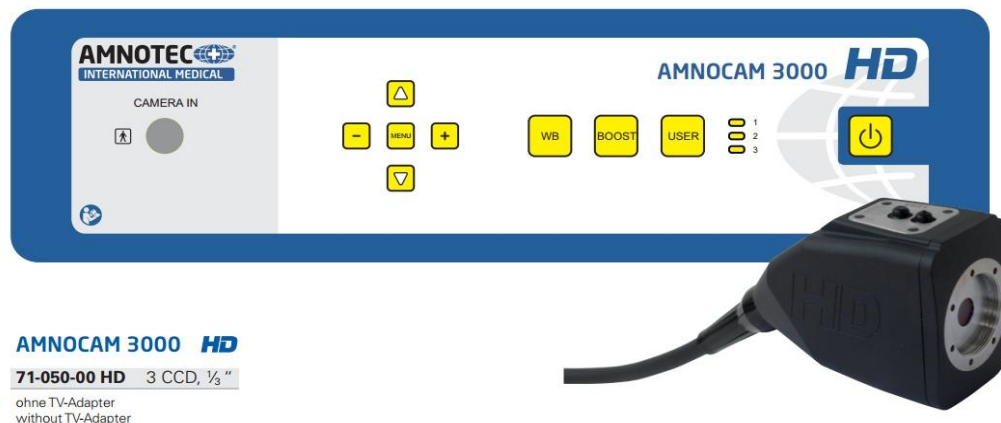

راه اندازی

پس از اتصال همه‌ی کابل‌ها، یونیت دوربین آماده‌ی راه‌اندازی است. با فشار دادن دکمه‌ی تغذیه، یونیت را روشن نمائید. دکمه‌ی تغذیه در این حالت به رنگ سبز در می‌آید. دستگاه پس از روشن شدن به صورت خودکار عیب‌یابی می‌شود. این فرایند با روشن و خاموش شدن همه‌ی لامپ‌های LED پنل جلوی دستگاه مشخص می‌شود.

پس از فرایند فوق دستگاه در وضعیت **STANDBY** قرار گرفته و دکمه‌ی **STANDBY** به رنگ زرد در می‌آید. با فشار دادن دکمه‌ی **STANDBY** دستگاه راه‌اندازی شده و دکمه‌ی **STANDBY** به رنگ سبز در آمده و صدای بوق شنیده می‌شود.

مانیتور وصل شده به یونیت دوربین در صورت روشن بودن، یک تصویر را نمایش می‌دهد. حال منبع نور سرد متصل به لنز جراحی را روشن کرده و شدت روشنایی آن را در وضعیت متوسط قرار دهید. سپس لنز وصل شده به سر دوربین (هد کمرا¹) را مقابل یک جسم با سطح صاف و سفید قرار دهید. با فشار دادن دکمه‌ی **WB** عملیات موازنه‌ی نور سفید (وایت بالانس²) را انجام دهید. دقت کنید که میان لنز و جسم سفید مانعی قرار نگرفته باشد. پس از عملیات وایت بالانس تصویری با نور مناسب و رنگ واقعی و خنثی روی مانیتور خواهیم داشت.

¹ Camera head

² White balance