


## راهنمای سریع راه اندازی و استفاده از منبع نور سرد کمپانی Amnotec مدل

### AMNOLIGHT 1800 LED

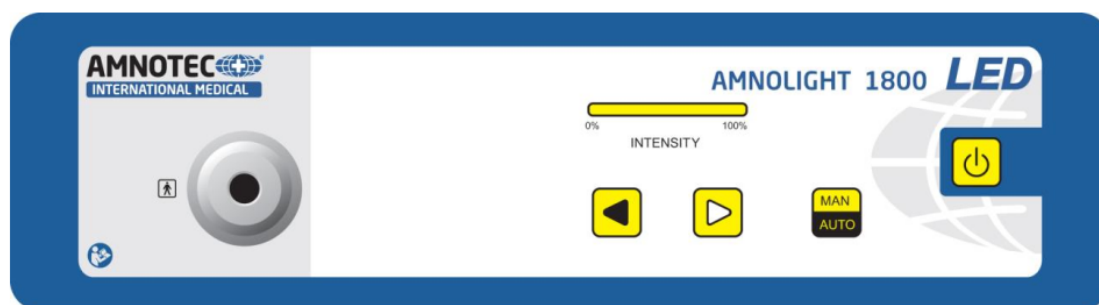

### راه اندازی

لطفاً قبل از اتصال کابل (فیبر) نور سرد به دستگاه مطمئن شوید که کابل مناسب را انتخاب نموده‌اید. کابل نور سرد نامناسب منجر به آسیب داخل تلسکوپ شده و همچنین به دلیل عدم اتصال کامل کابل نور سرد به لنز، اتلاف شدید نور را در پی خواهد داشت.

پس از اتصال همه‌ی رابط‌ها به دستگاه، دکمه‌ی تغذیه‌ی منبع نور سرد را که در پشت دستگاه است، روشن کنید تا به رنگ سبز درآید. در این حالت دستگاه پس از تست اولیه به حالت STANDBY درآمده و دکمه‌ی روشن/خاموش (STANDBY) جلوی دستگاه روشن می‌شود (زرد). با فشار دادن دکمه‌ی STANDBY دستگاه روشن می‌شود. در این حالت دکمه‌ی STANDBY به رنگ سبز درآمده و صدای بوق کوتاه شنیده می‌شود. پس از روشن شدن منبع نور، میزان نور تولیدی توسط دستگاه از طریق نوار لامپ‌های روشن جلوی دستگاه مشخص می‌شود. همچنین با زدن دکمه‌ی (MAN/AUTO) می‌توان شدت نور را در حالت خودکار یا دستی تنظیم کرد. سیستم خنک‌کننده پس از روشن شدن دستگاه شروع به کار می‌کند.

### استفاده

با روشن شدن دستگاه نوار لامپ‌های شدت نور در کمترین شدت قرار گرفته و دکمه‌ی کاهش شدت نور روشن می‌شود. میزان روشنایی خروجی دستگاه با استفاده از دکمه‌های "شدت نور" قابل تنظیم است. با

## راهنمای سریع راه اندازی و استفاده از منبع نور سرد کمپانی Amnotec مدل

### AMNOLIGHT 1800 LED

فشار دادن دکمه‌های افزایش و یا کاهش شدت نور، تعداد لامپ‌های روشن نوار جلوی دستگاه زیاد یا کم و انرژی نور درخشان تولیدی دستگاه زیاد یا کم می‌شود.

با رسیدن نور شدت نور به حالت کمینه و بیشینه شدت، به ترتیب دکمه‌های کاهش و افزایش شدت نور به صورت دائمی روشن می‌شوند. میزان روشنایی خروجی دستگاه با تعداد لامپ‌های روشن نوار "شدت نور" مشخص می‌شود (۰ تا ۱۰۰٪).

در صورت داغ شدن بیش از حد، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود. در این حالت می‌بایست منبع نور با فشار دادن دکمه‌ی تغذیه به طور کامل خاموش شده و تا قبل از خنک شدن نباید روشن شود.

#### وضعیت وقفه

با فشار دادن همزمان دکمه‌های "شدت نور" دستگاه در وضعیت وقفه قرار می‌گیرد. در این وضعیت منبع نور به طور موقت خاموش می‌شود اما دستگاه آماده‌ی استفاده‌ی مجدد است. با فشار دادن هر کدام از دکمه‌های "شدت نور" دستگاه مجدداً در وضعیت عملیاتی قرار می‌گیرد.

### خاموش کردن

پس از پایان کار، با نگه داشتن دکمه‌ی روشن/خاموش به مدت ۲ ثانیه، منبع نور را در وضعیت "STANDBY" قرار داده و با زدن دکمه‌ی تغذیه‌ی اصلی در پشت دستگاه، منبع نور به طور کامل خاموش می‌شود. خاموشی کامل دستگاه با یک صدای بوق کوتاه همراه است.