


## راهنمای سریع راه اندازی و استفاده از یونیت اینسافلیتور CO2 کمپانی Amnotec

### مدل AMNOFLOW 30 LAP

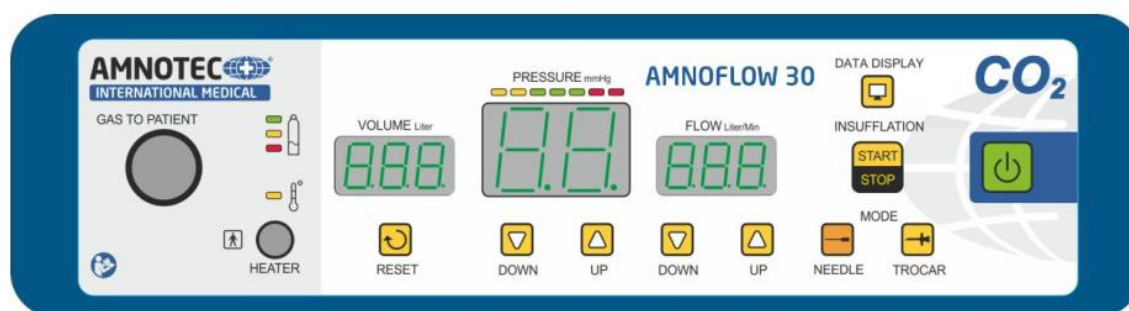

### راه اندازی

#### روشن کردن دستگاه

**احتیاط: قبل از روشن کردن اینسافلیتور لازم است تمام اتصالات مجدداً بسته شوند.**

پس از بستن مجدد تمام اتصالات، راه اندازی اینسافلیتور مقدور خواهد بود.

- با زدن سوئیچ اصلی تغذیه دستگاه روشن شده و لامپ سبز رنگ داخل سوئیچ روشن می شود.
- در این حالت دستگاه در وضعیت STANDBY قرار گرفته و دکمه STANDBY به رنگ زرد در می آید.
- شیر مخزن گاز اتاق عمل (یک دور کامل در خلاف جهت عقربه های ساعت) و یا مخزن تغذیه ی گاز مرکزی را به آرامی باز کنید.
- با فشار دادن دکمه STANDBY دستگاه راه اندازی می شود. بلافاصله پس از زدن این دکمه فرایند تست توسط دستگاه<sup>1</sup> انجام شده و در طول این فرایند تمام لامپ های LED پنل جلوی دستگاه به ترتیب روشن خواهند شد. پس از پایان تست، یونیت راه اندازی شده و دکمه STANDBY به رنگ سبز در می آید.

<sup>1</sup> Self-test

## راهنمای سریع راه اندازی و استفاده از یونیت اینسافلیتور CO2 کمپانی Amnotec

### مدل AMNOFLOW 30 LAP

تذکر: در صورت بروز خطا در فرایند تست، عبارت "Err" روی نمایشگر حجم و یک عدد سه رقمی روی نمایشگر جریان (فلو<sup>۲</sup>) نشان داده می شود.

➤ در حالتی که فشار سیستم کافی باشد، نمایشگر مربوط به فشار سبز رنگ خواهد شد؛ در حالتی که نیاز به تعویض قریب الوقوع مخزن باشد، نمایشگر به رنگ زرد آمده و در صورتی که حین کار کردن اینسافلیتور مخزن گاز کاملاً خالی شود، نمایشگر به رنگ قرمز چشمک زن در می آید.

---

<sup>2</sup> Flow